

|                            |                                                             |                                |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>          |                                        | <b>Página 1 de 11</b> |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |                       |
|                            |                                                             | Versão: 01                     |                                        |                       |

---

## APRESENTAÇÃO

---

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo balança de bancada.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

|                            |                                                             |                                |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>          |                                        | <b>Página 2 de 11</b> |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |                       |
|                            |                                                             | Versão: 01                     |                                        |                       |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO.....</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2 OBJETIVO.....</b>                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>4 PÚBLICO-ALVO.....</b>                                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>5 MATERIAL.....</b>                                                                                         | <b>4</b>  |
| 5.1 Padrões.....                                                                                               | 4         |
| 5.2 Equipamentos de proteção necessários.....                                                                  | 5         |
| 5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....                                                                    | 5         |
| <b>6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| 6.1 Periodicidade de execução.....                                                                             | 6         |
| 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....                                                           | 6         |
| 6.3 Coleta e registro de dados.....                                                                            | 7         |
| 6.3.1 Formulário para coleta de dados.....                                                                     | 7         |
| 6.3.2 Coleta de dados.....                                                                                     | 7         |
| 6.3.3 Cálculos metrológicos.....                                                                               | 8         |
| <b>7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....</b>                               | <b>8</b>  |
| 7.1 Certificado de calibração.....                                                                             | 8         |
| 7.2 Aprovação.....                                                                                             | 9         |
| <b>8 REFERÊNCIAS.....</b>                                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo balança de bancada.....</b> | <b>10</b> |


|                            |                                                             |                                              |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>                        | <b>Página 3 de 11</b>                  |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026<br>Versão: 01 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |

## 1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).


Os equipamentos do tipo balança de bancada podem se subdividir em balanças de precisão analítica e de precisão semi-analítica. Estes instrumentos de pesagem são utilizados em laboratório e diferem entre si quanto a resolução e a reprodutibilidade. No geral, as balanças semi-analíticas possuem resolução de 1mg a 10mg e reprodutibilidade de 1mg a 50mg, enquanto as balanças analíticas apresentam resolução de 0,01 mg a 0,1mg e reprodutibilidade mínima de 0,1mg (GMDN AGENCY, 2012a; GMDN AGENCY, 2012b).

*Figura 1 – Balança de bancada de precisão analítica.*

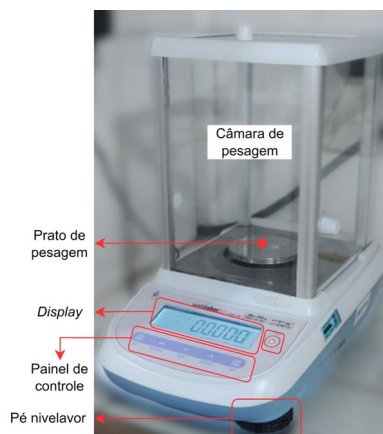

*Fonte: Elaboração própria (2021).*

*Figura 2 - Diagrama em blocos de uma balança de bancada genérica.*

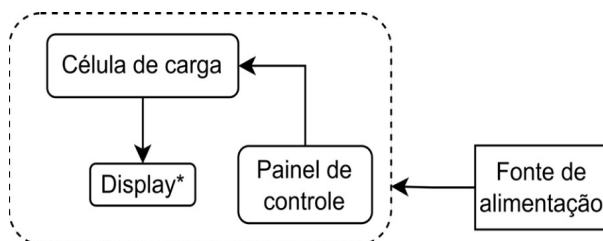

\* Display com resolução variável de acordo com a balança.

*Fonte: Elaboração própria (2021).*

## 2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo balança de bancada.

|                            |                                                             |                                              |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>                        | <b>Página 4 de 11</b>                  |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026<br>Versão: 01 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |

### 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

*Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.*

| Lista de documentos |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INMETRO (1994)      | Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem. |
| ABNT (2017)         | ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.                                                  |
| ABNT (1994)         | ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.                                                                                                     |

*Fonte: Elaboração própria (2021).*

### 4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo balança de bancada. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

### 5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

#### 5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

*Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.*

| Padrão                   | Especificações                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termohigrômetro          | Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR. |
| Conjunto de pesos padrão | Kit de pesos padrão com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Conjunto de pesos padrão com somatório                                       |

|                            |                                                             |                                              |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>                        | <b>Página 5 de 11</b>                  |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026<br>Versão: 01 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | correspondente a 3Kg. |
|--|-----------------------|

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

| <b>Risco/Exposição</b>                                                                                | <b>Equipamentos de proteção sugeridos</b>                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco biológico<br>  | Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável. |
| Choque elétrico<br> | Calçado de segurança.                                                                 |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material para limpeza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pano macio;</li> <li>Detergente neutro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material para desinfecção</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pano macio;</li> <li>Desinfetantes à base de quaternário de amônio.</li> </ul> <p>✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.</p> <p>✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.</p> |


Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo balança de bancada. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

|                            |                                                             |                                              |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>                        | <b>Página 6 de 11</b>                  |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026<br>Versão: 01 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamentos do tipo balança de bancada.

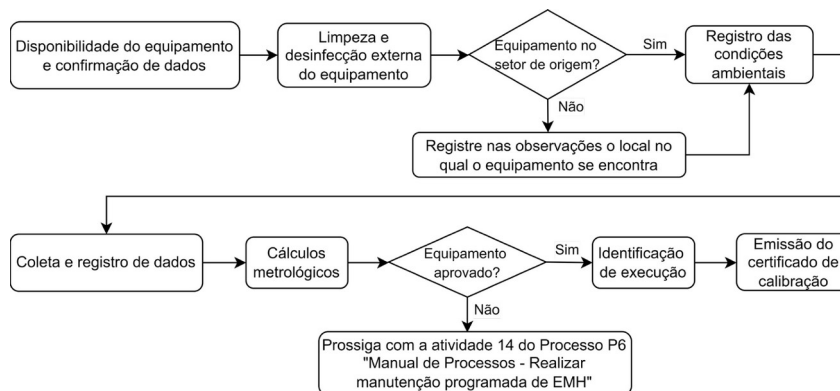

Fonte: Elaboração própria (2022).

## 6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo balança de bancada é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido de acordo com a Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 (INMETRO, 1994).

Quadro 5 - Periodicidade base.

|                               | <b>Legislação/Norma</b> | <b>Metodologia OMS</b> | <b>Fabricante</b> |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Periodicidade indicada</b> | 12 meses                | N.A.                   | N.A.              |

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

## 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento. Certifique-se de não deixar vestígios de solução ou fiapos do pano utilizado na superfície do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

|                            |                                                             |                                |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>          |                                        | <b>Página 7 de 11</b> |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |                       |
|                            |                                                             | Versão: 01                     |                                        |                       |

## 6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

### 6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo balança de bancada, constante no Anexo A deste documento.

### 6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo balança de bancada estão dispostas no Quadro 6.

*Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo balança de bancada.*

| <b>Verificações iniciais</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item de verificação</b>     | <b>Instruções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Localização do equipamento     | Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.                                                                                                                                                                                                      |
| Identificação do equipamento   | Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Disponibilidade do equipamento | Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. |
| Condições ambientais           | Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Limpeza externa do equipamento | Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Avaliação dos parâmetros

### Calibração - Leitura de massa

1. Certifique-se de que o equipamento está estável em sua superfície de apoio. Se necessário realize ajuste nos pés niveladores.
2. Ligue o equipamento, certifique-se de que não há nada em cima do prato de pesagem do equipamento, e dê o comando para tara da balança.
3. Posicione o(s) peso(s) padrão que corresponde(m) ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados, em cima do prato de pesagem da balança. Quando aplicável, distribua-os por sobre toda superfície do prato de pesagem.

|                            |                                                             |                                              |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>                        | <b>Página 8 de 11</b>                  |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026<br>Versão: 01 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |

4. Aguarde estabilização da leitura pela balança. Registre no formulário de dados, em local adequado, o valor apresentado pela balança.
5. Refaça os itens de 2 e 3 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

*Figura 4 - Imagem ilustrativa de local para posicionamento dos pesos padrões.*



*Fonte: Elaboração própria (2022).*

*Fonte: Elaboração própria (2021).*

### 6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba "Formulário para coleta de dados" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo balança de bancada".

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba "Cálculos e Análise" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo balança de bancada".

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

*Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.*

| <b>Parâmetro</b> | <b>Tolerância sugerida</b> |
|------------------|----------------------------|
| Leitura de massa | ±10%                       |

*Fonte: Elaboração própria (2021).*

## 7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.



|                     |                                                      |                                |                                        |                |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                 | POP.EC.CAL.021                 |                                        | Página 9 de 11 |
| Título do Documento | CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |                |
|                     |                                                      | Versão: 01                     |                                        |                |

## 7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo balança de bancada”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

## 7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

## 8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electronic precision balance**. Reino Unido: GMDN, 4/9/2012a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/135823?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electronic analytical balance**. Reino Unido: GMDN, 4/9/2012b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/135821?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria nº 236, de 22 de dezembro de 1994**: Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem. Rio de Janeiro: INMETRO, 1994.

## 9 HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
|        |      |                        |

|                            |                                                             |                                              |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>                        | <b>Página 10 de 11</b>                 |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026<br>Versão: 01 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |

## ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo balança de bancada

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.021 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo balança de bancada.

### EQUIPAMENTO INSPECIONADO

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Modelo:            | Fabricante:  |
| Código de ID:      | Nº de série: |
| Setor/Localização: |              |

### EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

|       |       |
|-------|-------|
| Hora: | Data: |
|-------|-------|

### 01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

| Item a ser verificado          | C | N.C | Observações |
|--------------------------------|---|-----|-------------|
| Disponibilidade do equipamento |   |     |             |

### 02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

| Item a ser verificado      | Valor medido |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura (°C)           |              |
| Umidade Relativa (U.R.(%)) |              |

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

### 03 LEITURA DE MASSA

| Valor Nominal | Valor medido 1 | Valor medido 2 | Valor medido 3 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 10,00 g       |                |                |                |
| 20,00 g       |                |                |                |
| 100,00 g      |                |                |                |
| 500,00 g      |                |                |                |
| 1000,00 g     |                |                |                |
| 2000,00 g     |                |                |                |
| 3000,00 g     |                |                |                |

### OBSERVAÇÕES

|                   |              |
|-------------------|--------------|
|                   |              |
|                   |              |
| <b>Elaboração</b> | <b>Data:</b> |

|                            |                                                             |                                |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo do Documento</b>   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>                                 | <b>POP.EC.CAL.021</b>          | <b>Página 11 de 11</b>                 |
| <b>Título do Documento</b> | <b>CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA DE BANCADA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                            |                                                             | Versão: 01                     |                                        |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Revisão</b>                              | <b>Data:</b> |
| <b>Validação</b>                            | <b>Data:</b> |
| <b>Aprovação (Nome, Função, Assinatura)</b> | <b>Data:</b> |