

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 1/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 2/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	8
6.3.2 Coleta de dados	8
6.3.3 Cálculos metrológicos	12
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12
7.1 Certificado de calibração	12
7.2 Aprovação	12
8 REFERÊNCIAS	13
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular	14


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 3/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular são equipamentos destinados a aplicação de terapia neuromuscular com diversos modos de estimulação elétrica. O equipamento é composto por um gerador de pulsos de corrente elétrica, sua unidade principal, e tem aplicação via eletrodos não invasivos (GMDN AGENCY, 2021).


Figura 1 – Estimulador elétrico neuromuscular.

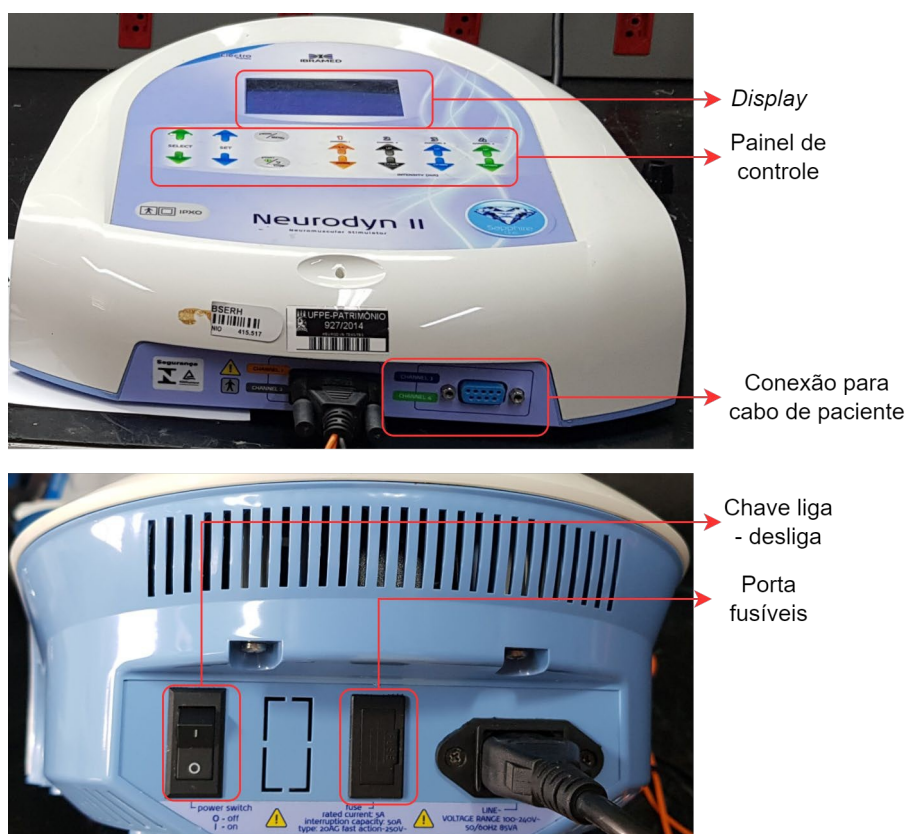

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 4/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de um Estimulador Elétrico Neuromuscular genérico.

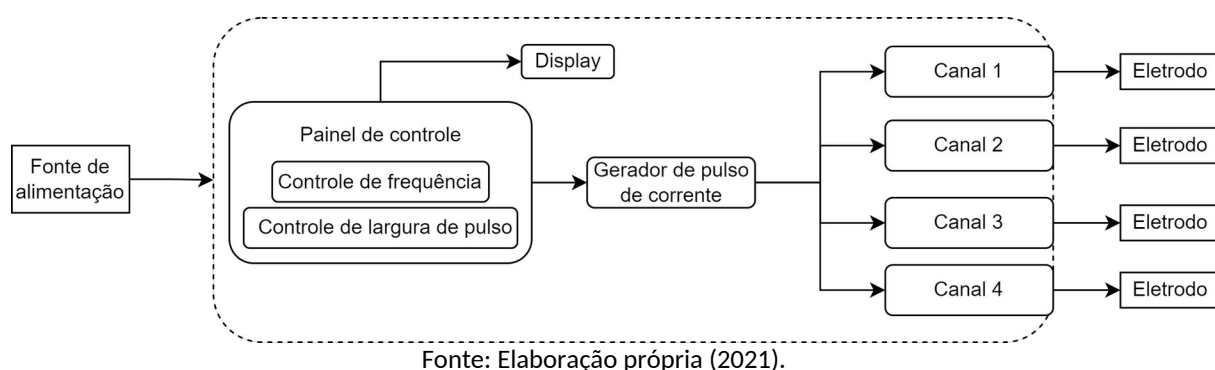

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos ger. competência de laboratórios de ensaio e calibr
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-10:2014 - B eletromédico - Parte 2-40: Requisitos particu segurança básica e o desempenho e
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e mante
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de e para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletr Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equ
IBRAMED (2009)	Estimulador neuromuscular Neurodyn. Manual
IBRAMED (2007)	Instruções de uso. Estimulador Neuromuscular
TONE DERM (2005a)	Manual de instruções. Eletroestimulador AF-7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 5/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
TONE DERM (2005b)		Manual de instruções. Eletroestimulador M-40.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Osciloscópio digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC).
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.028 – Página 6/15		
EQUIPAMENTOS DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		CALIBRAÇÃO DE
	ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR	Versão:	

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.


Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 7/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração.

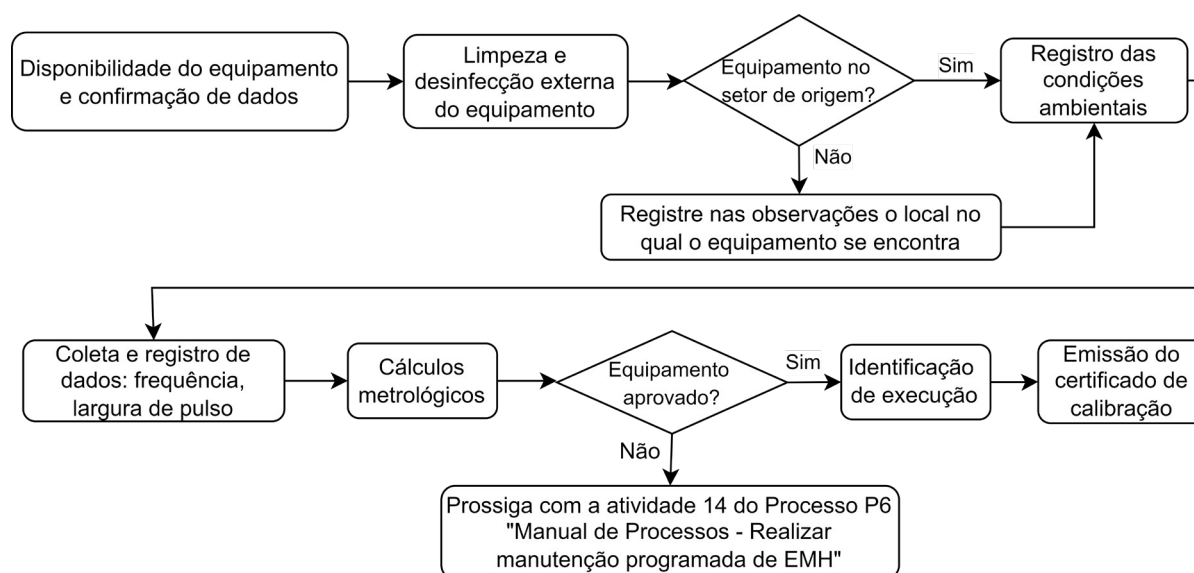

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT,2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.028 – Página 8/15		
EQUIPAMENTOS DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		CALIBRAÇÃO DE
	ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR	Versão:	

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido



à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cabos de paciente e demais acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabos de paciente e demais acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados


Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Na Figura 4 tem-se a ilustração de montagem utilizada para calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular, na qual a ponteira do osciloscópio é conectada ao cabo do paciente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.028 – Página 9/15		
EQUIPAMENTOS DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		CALIBRAÇÃO DE
	ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR	Versão:	

Figura 4 - Montagem para calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

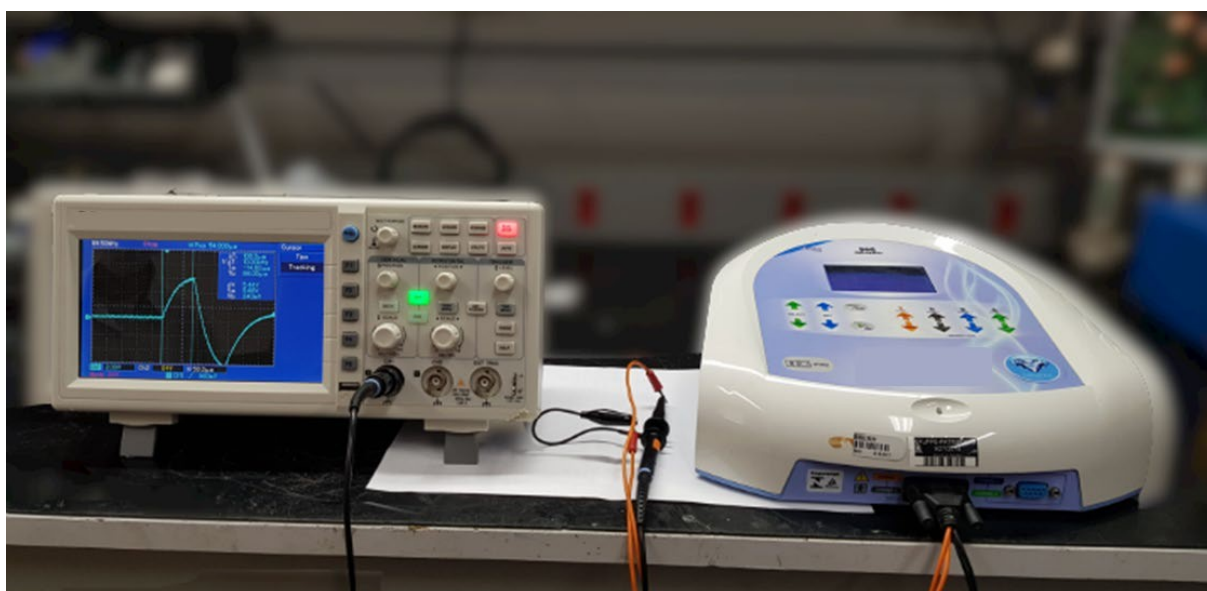

Fonte: Elaboração própria (2021).

A calibração dos parâmetros deve ser realizada para todos as funções existentes no  equipamento.

Quadro 6 - Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 10/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
--	--

Avaliação dos parâmetros

Frequência (Hz)

1. Conecte o cabo de paciente ao estimulador elétrico neuromuscular.
2. Ligue o osciloscópio e conecte a ponteira de teste aos eletrodos do cabo de paciente conectado ao estimulador elétrico neuromuscular.


Figura 5 - Ponteira de teste do osciloscópio conectada ao cabo de paciente do estimulador elétrico neuromuscular.



Fonte: Elaboração própria (2021).

3. Configure o equipamento para a primeira função a ser analisada, com largura de pulso fixa de 100µs, intensidade 10 e modo normal.
4. No estimulador elétrico neuromuscular configure o primeiro ponto de frequência a ser analisado de acordo o formulário de coleta de dados.
5. No osciloscópio verifique o valor de frequência apresentado e registre no formulário de coleta de dados.

Figura 6 - Exemplo de valor de frequência (60.24Hz) apresentado por osciloscópio durante calibração de estimulador elétrico neuromuscular.

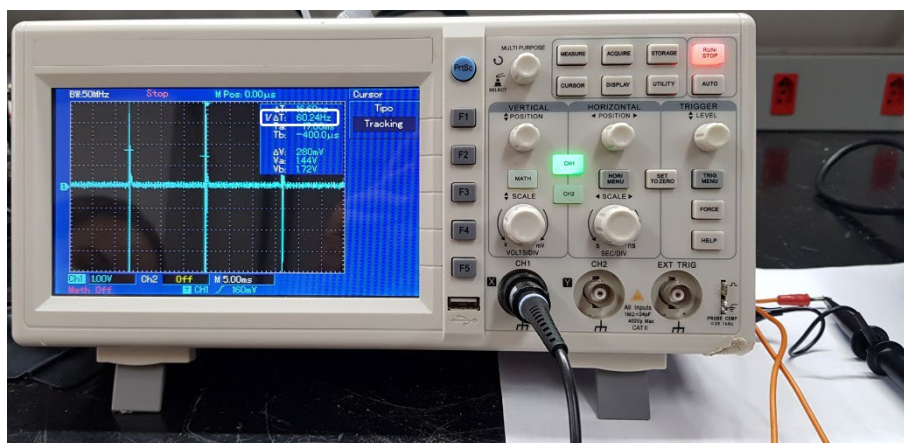

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.028 – Página 11/15		
EQUIPAMENTOS DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		CALIBRAÇÃO DE
	ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR	Versão:	

6.Repita os itens 4 e 5 para os demais valores do parâmetro. Realize mais dois ciclos para obtenção dos valores necessários para preenchimento do formulário de coleta de dados.

✓ Caso o osciloscópio não realize a leitura do sinal, verifique a conexão da ponteira com os eletrodos. Se possível substitua o cabo de paciente. Consulte o manual do usuário e verifique se é necessário realizar algum ajuste. Refaça os testes. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Largura de pulso (μ s)

- 1.Conecte o cabo de paciente ao estimulador elétrico neuromuscular.
- 2.Ligue o osciloscópio e conecte a ponteira de teste aos eletrodos do cabo de paciente conectado ao estimulador elétrico neuromuscular.
- 3.Configure o equipamento para a primeira função a ser analisada, com frequência fixa de 100Hz, intensidade 10 e modo normal.
- 4.No estimulador elétrico neuromuscular configure o primeiro ponto de largura de pulso a ser analisado de acordo com o formulário de coleta de dados.
- 5.No osciloscópio utilize o cursor e verifique o valor da largura do pulso do sinal apresentado e registre no formulário de coleta de dados.

Figura 7 - Exemplo de valor de largura de pulso (100 μ s) apresentado por osciloscópio durante calibração de estimulador elétrico neuromuscular.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.Repita os itens 4 e 5 para os demais valores do parâmetro. Realize mais dois ciclos para obtenção dos valores necessários para preenchimento do formulário de coleta de dados.

✓ Caso o osciloscópio não realize a leitura do sinal, verifique a conexão das ponteiras com os eletrodos. Se possível substitua o cabo de paciente. Consulte o manual do usuário e verifique se é necessário realizar algum ajuste. Refaça os testes. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 12/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência	
Largura de pulso	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 13/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-10**: Equipamento eletromédico. Parte 2-10: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de estimuladores ne nervos e músculos: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Physical therapy transcutaneous neuromuscular electrical stimulation system**. Reino Unido: GMDN, 5/2/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/136894?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

IBRAMED – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Estimulador neuromuscular Neurodyn. Manual de operação**. Brasil: Ibramed, 2009.

IBRAMED – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Estimulador Neuromuscular Cadmus 10 Canais C-5001**. Brasil: Ibramed, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

TONE DERM PAGANIN. **Manual de instruções. Eletroestimulador AF-7**. Brasil: Tone derm, 2005a.

TONE DERM PAGANIN. **Manual de instruções. Eletroestimulador M-40**. Brasil: Tone derm, 2005b.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 14/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.028 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA – FUNÇÃO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 Hz			
80,00 Hz			
120,00 Hz			

04 CALIBRAÇÃO DA LARGURA DE PULSO – FUNÇÃO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
200,00 µs			
400,00 µs			
700,00 µs			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.028 – Página 15/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: