

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.034 – Página 1/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo cardiotocógrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.034 – Página 2/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	8
6.3.2 Coleta de dados	8
6.3.3 Cálculos metrológicos	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	11
7.1 Certificado de calibração	11
7.2 Aprovação	12
8 REFERÊNCIAS	12
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo cardiotocógrafo	14

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 3/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).


Os equipamentos do tipo cardiotocógrafo são utilizados para monitoração fetal, através de condições do feto, batimento cardíaco e movimentação, e condições da gestante, contrações uterinas. São compostos, basicamente, por transdutores conectados a um monitor por cabos ou conexão wireless (GMDN AGENCY,2011).

Figura 1 - Equipamento do tipo cardiotocógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cardiotocógrafo.

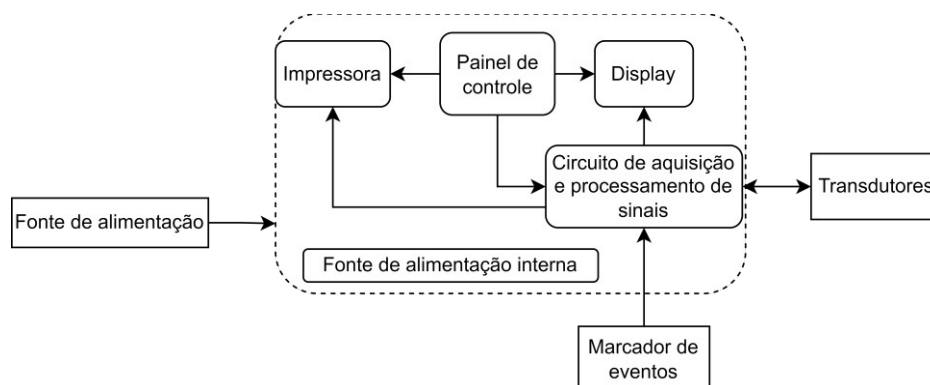

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 4/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo cardiotocógrafo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR IEC 60601-2-23:2015 - Equipamento eletromédico - Parte 2-23: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
KOLPLAST (2018)	Manual de instruções. Monitor fetal cardiotocográfico. Modelo: Gold/ Diamond/ Platinum.
BIONET (2020)	Manual do operador. Monitor fetal Cardiotocográfico. Modelo EC-700.
PHILIPS (2018)	Monitor fetal Pré-parto Avalon. FM20, FM30, FM40, FM50
TOITU (2021)	Manual do usuário. Cardiotocógrafo Toitu. Modelo M

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 5/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo cardiotocógrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de sinais fisiológicos	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Simulador de sinais fisiológicos de simular pressão intrauterina com faixa de medida de 30mmHg a 90mmHg, resolução de 1 mmHg; e frequência cardíaca fetal com faixa de medição de 60BPM a 180BPM.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.EC.CAL.034 – Página 6/15		
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CARDIOTOCÓGRAFO Versão:	Emissão:	Próxima revisão:

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
•	Pano macio;
✓	Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.


Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 7/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo cardiotocógrafo. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamento do tipo cardiotocógrafo.

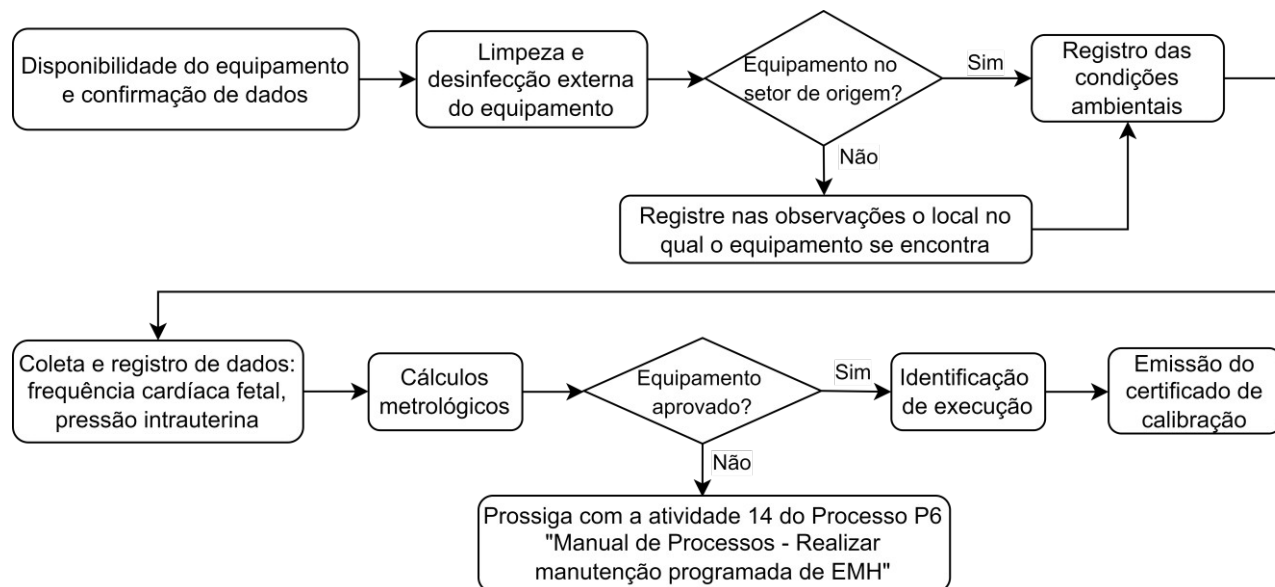

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo cardiotocógrafo é de 12 meses. O valor foi definido com base em valor sugerido pelos fabricantes consultados e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.EC.CAL.034 – Página 8/15		
Documento	Emissão: CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Próxima revisão:	Título do

Documento

CARDIOTOCÓGRAFO Versão:



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo cardiocógrafa, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.EC.CAL.034 – Página 9/15		
Documento	Emissão:	Próxima revisão:	Título do
	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Documento **CARDIOTOCÓGRAFO** Versão:

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo cardiotocógrafo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme externa orientações do item 6.2 deste procedimento.



Avaliação dos parâmetros

Frequência Cardíaca Fetal (FCF)

O cabo de teste utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o cardiotocógrafo que está sendo analisado. Geralmente no manual do simulador há indicações a respeito da pinagem adequada do cabo a ser confeccionado. Alguns fabricantes de simuladores também já fornecem cabos prontos de acordo com o modelo do equipamento a ser analisado.

1. Conecte o cabo de teste ao simulador e ao cardiotocógrafo.

Figura 4 - Conexão entre o simulador e o equipamento para análise da frequência cardíaca fetal.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2. No simulador, selecione a opção para simulação da frequência cardíaca fetal e configure-o para simulação do primeiro valor de frequência constante no formulário de coleta de dados. Não é necessário configurar um valor de pressão intrauterina.

3. Registre o valor de frequência cardíaca fetal, apresentado pelo equipamento analisado, no formulário de coleta de dados.

4. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 3 a 4. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.EC.CAL.034 – Página 10/15		
Documento	Emissão: CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Próxima revisão:	Título do

Documento **CARDIOTOCÓGRAFO** Versão:

✓ Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão do cabo de teste e substitua-o em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Quando aplicável, verifique também se a sensibilidade do simulador está adequada ao equipamento utilizado. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

✓ Pressão Intrauterina (Contração Uterina)

O cabo de teste utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o cardiotocógrafo que está sendo analisado. Geralmente no manual do simulador há indicações a respeito da pinagem adequada do cabo a ser confeccionado. Alguns fabricantes de simuladores também já fornecem cabos prontos de acordo com o modelo do equipamento a ser analisado.

1. Configure o equipamento cardiotocógrafo para apresentação do gráfico e valor de contração uterina. Certifique-se de que a unidade apresentada pelo gráfico está em mmHg. Se possível, configure o equipamento apenas para a avaliação da pressão intrauterina (contração uterina).
2. Conecte o cabo de teste ao simulador e ao cardiotocógrafo. No simulador e no cardiotocógrafo, pressione o comando para zerar a pressão.

Figura 5 - Conexão entre o simulador e o equipamento para análise da pressão intrauterina.

Fonte: Elaboração própria (2021).

3. No simulador, selecione a opção para simulação da onda de pressão intrauterina e configure-o para simulação do primeiro valor de pressão intrauterina constante no formulário de coleta de dados. Nesta opção o simulador também estabelecerá um valor fixo de FCF.
4. Registre o valor de pressão intrauterina (em mmHG), apresentado pelo equipamento analisado, no formulário de coleta de dados.
5. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 3 a 4. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.

✓

Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão do cabo de teste e substitua-o em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Quando aplicável, verifique também se a sensibilidade do simulador está adequada ao equipamento utilizado. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 11/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo cardiotocógrafo”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo cardiotocógrafo”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência cardíaca fetal	± 5%
Pressão intrauterina	± 5%

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo cardiotocógrafo”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 12/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-23**: Equipamento eletromédico. Parte 2-23: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos de monitoração da pressão parcial transcutânea. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

BIONET CO.,LTD. **Manual do operador. Monitor fetal Cardiotocógrafo Fetalcare. Modelo FC-700**. r. 3. Coréia do Sul: Bionet, 2014.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Cardiotocograph**. Reino Unido: GMDN, 20/6/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121380?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

KOLPLAST CI S.A. **Manual de instruções. Monitor fetal cardiotocógrafo. Modelo: Gold/ Diamond/ Platinum**. r.11. Brasil: Kolplast, 2018.

PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GmbH. **Monitor fetal Pré-parto Avalon. FM20, FM30, FM40, FM50**. Alemanha: Philips, 2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 13/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

TOITU CO.LTD. **Manual do usuário. Cardiotocógrafo Toitu. Modelo MT-516.** v.4. Japão: Toitu, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 14/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo cardiotocógrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.034 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo cardiotocógrafo

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (BPM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60 BPM			
120 BPM			
240 BPM			

04 CALIBRAÇÃO - PRESSÃO INTRAUTERINA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 mmHg			
60,00 mmHg			
90,00 mmHg			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.034 – Página 15/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Elaboração		Data:	
Revisão		Data:	
Validação		Data:	
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)		Data:	