

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 1/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo videolaringoscópio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 2/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12 8
REFERÊNCIAS	12 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo videolaringoscópio	14

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 3/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videolaringoscópio.


Os equipamentos do tipo videolaringoscópio são utilizados nos procedimentos de intubação traqueal, inserção de um tubo até a traqueia do paciente, nesse caso, via bucal. O equipamento proporciona a equipe médica uma visão adequada da laringe do paciente. É composto por um cabo principal, um sistema de vídeo e lâminas de diversos tamanhos (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 – Equipamento do tipo videolaringoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo videolaringoscópio.

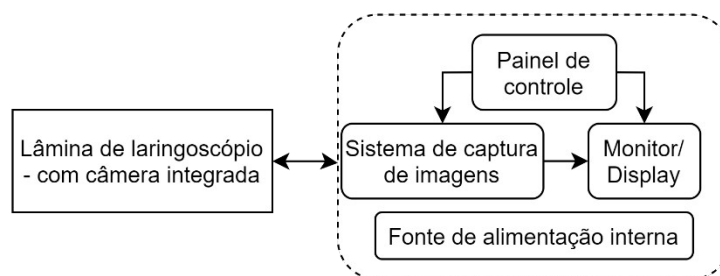

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 4/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo videolaringoscópio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2016)	ABNT NBR ISO 7376 - Equipamento respiratório e anestésico – Laringoscópios para intubação traqueal
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-
KING SYSTEMS (2013)	Laringoscópio vídeo. King Vision. Manual de instruções Para utilização com lâminas padrão e em canal.
AIRCRAFT MEDICAL (2012)	McGrath MAC Vídeo Laringoscópio. Manual do operador (Instruções de utilização).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 5/15	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
KARL STORZ (2019)		Manual de instruções. Videolaringoscópio C-MAC módulo eletrônico 8401/8402 X. C-MAC PM 8401	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videolaringoscópio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) e 1x150mm (1/4x5”); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16” a 1/8”)
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16” e 3/8”.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 150mm

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.027 – Página 6/15		
Título do Documento			

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE			
EQUIPAMENTOS DO TIPO			
VIDEOLARINGOSCÓPIO			
		Emissão:	
		Versão:	
		Próxima revisão:	

Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para

substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho
Lâminas de laringoscópio	insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.027 – Página 7/15
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO

VIDEOLARINGOSCÓPIO

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.


Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo videolaringoscópio. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 8/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videolaringoscópio.

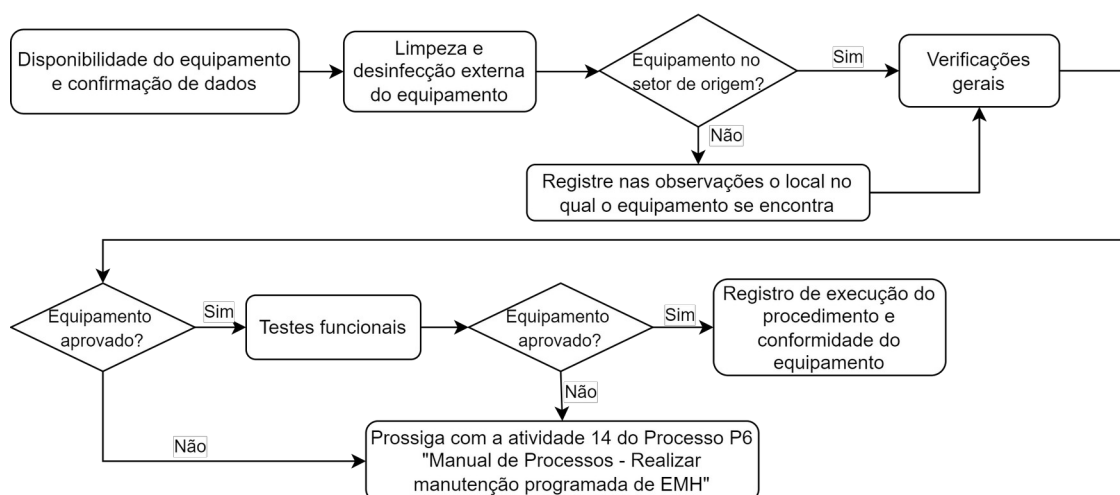

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo videolaringoscópio é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou sugestões de fabricantes, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 7 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade foi estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.027 – Página 9/15		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	

VIDEOLARINGOSCÓPIO

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:



Antes de iniciar a limpeza e desinfecção externa remova a bateria/pilha do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e lâminas .

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor do equipamento e lâminas. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

Para uso em pacientes as lâminas devem ser desinfetadas pela equipe de enfermagem da



instituição.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo videolaringoscópio, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do <i>checklist</i> , execute as instruções dispostas no Quadro 7.	
	Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo videolaringoscópio.

Verificações iniciais

Item de verificação

Instruções

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 10/15	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntame justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamen conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranh manchas, rachaduras, pontos de oxidação, ressecamento e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efet reparo necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Integridade dos botões de controle		- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os bo ficam presos ao serem acionados. Não deve h rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúm de resíduos. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desl quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Em situações de avarias que possam compron segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos quei <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a vis dos parâmetros indicados pelo equipamer proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manu	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 11/15	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade e funcionamento: fonte de alimentação		- Quando aplicável. Verifique se há deformidades no cabo da fonte de alimentação que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades da fonte e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Com um multímetro verifique se o valor da tensão saída da fonte condiz com sua especificação. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, substitua imediatamente.	
Bateria		- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. Caso o equipamento não ligue, verifique o encaixe da bateria. - Quando aplicável, com o multímetro verifique a tensão da bateria e/ou pilhas. - Quando aplicável, verifique a integridade física e o funcionamento do carregador de bateria. Não deve haver deformação ou partes quebradas.	
Lâminas		Verifique a integridade do conjunto de lâminas do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e pontos de oxidação e deformidades. Registre as observações identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>.	
Limpeza Interna		Utilizando limpa contatos, realize a limpeza do compartimento de bateria/pilhas. Registre o estado de conservação do compartimento no <i>checklist</i>.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Imagem		- Realize o teste de imagem para todas as lâminas disponíveis. - Instale a primeira lâmina para teste e ligue o equipamento. Verifique se a imagem apresentada está nítida. - Teste as configurações de brilho e contraste da tela. Caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 12/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		persistir, proceder com atividade 14 do Proce “Manual de Processos – Realizar manutenção	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AIRCRAFT MEDICAL LTD. **McGrath MAC Vídeo Laringoscópio. Manual do operador (Instruções de utilização)**. r.5.1. Inglaterra: Aircraft Medical, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 13/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 7376** - Equipamento respiratório e anestésico – Laringoscópios para intubação traqueal. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o '**tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Video intubation laryngoscope handle/monitor**. Reino Unido: GMDN, 31/5/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2004944?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

KARL STORZ. **Manual de instruções. Videolaringoscópio C-MAC 8401xxx, módulo eletrônico 8401/8402 X, C-MAC PM 8401 XD**. Alemanha: Karl Storz, 2019.

KING SYSTEMS CORPORATION. **Laringoscópio vídeo. King Vision. Manual de instruções. Para utilização com lâminas padrão e em canal**. EUA: King Systems, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 – Página 14/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo videolaringoscópio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.027 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo videolaringoscópio.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade dos botões				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e funcionamen				
Bateria				
Lâminas				
Limpeza Interna				

02 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Imagem				

OBSERVAÇÕES

Executor



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.027 - Página 15/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: