

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 1/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo selador pacote.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 2/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	4
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	13
8 REFERÊNCIAS	14
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	14
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo selador pacote	15

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 3/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo selador pacote.


Os equipamentos do tipo selador pacote são utilizados para realizar o fechamento hermético de pacotes cirúrgicos. A selagem é feita por meio de aplicação de calor na embalagem a ser vedada, e busca garantir a esterilidade do material em seu interior (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Selador pacote.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo selador pacote.

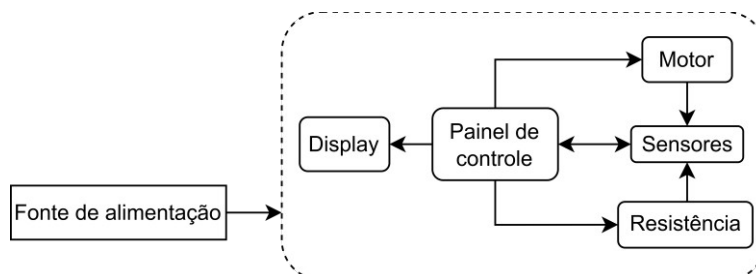

Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo selador pacote.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 4/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e o
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
EVOXX (2020)	Manual de instruções. Seladora EVOXX.
GNATUS (s.d.)	Manual do proprietário. Seladora Clean Pack.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo selador pacote. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 5/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 5x150mm (1/2x6"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C – +200°C; resolução: 0.1°C

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Resistência	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 6/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Rolamentos do motor	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Correia do motor	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Proteção ocular	Óculos de proteção.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 7/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	


- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
- ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo selador pacote. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo selador pacote.

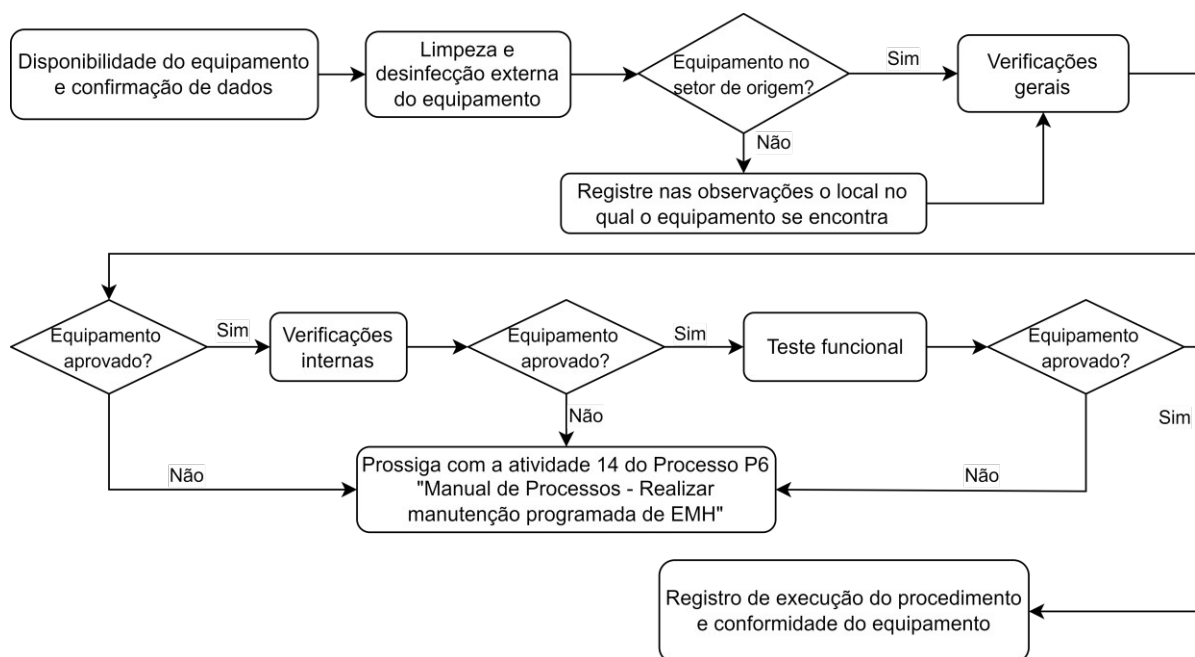

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 8/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011), não há indicação de período por parte dos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 6 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo selador pacote, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 9/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo selador pacote.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor da etiqueta.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registrar as avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, registrar no campo de observação.
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade das chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se as teclas estão funcionando corretamente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 10/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade dos potenciômetros de temperatura quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Realize o movimento completo do potenciômetro, não deve ser necessário o uso de força excessiva e o potenciômetro deve permanecer no local em que foi posicionado. • Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela seja normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, c	
Integridade do display		• Quando aplicável. Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam	
Integridade e continuidade do cabo de força		• Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta no cabo de força. Utilizando um multímetro teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição.	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contatos. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso	
Integridade da alavanca de corte		• Quando aplicável, verifique a integridade da alavanca de corte quanto a deformidades e rachaduras. • Posicione um papel grau cirúrgico para corte, e realize a movimentação da alavanca. Não deve ser necessário o uso de força excessiva e o papel deve ser cortado completamente. • Para os casos em que o corte não for realizado, a alavanca não realizar o movimento, o item estará conforme. Nestes casos, proceder com a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 11/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alavanca de acionamento (selagem)	- Quando aplicável, verifique a integridade da alavanca de acionamento quanto a deformidades e rachaduras. - Com o equipamento desligado, realize a movimentação da alavanca. Não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Para os casos em que o corte não for realizado, a alavanca não realizar o movimento, o item estará em boas condições.		
Resistência	- Verifique a integridade da resistência quanto a deformidades, rachaduras, manchas e desgaste. - Verifique se as extremidades da resistência estão fixadas em local adequado. Quando aplicável, realize os ajustes necessários. - Para os casos em que a resistência apresentar danos, substitua a resistência.		
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. ⚠ As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. ! Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo selador pacote estão localizados em sua parte posterior (traseira) e inferior do equipamento. o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Alguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha. o Separe os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem. o Ao retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, poderá ser necessário realizar desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagens e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	

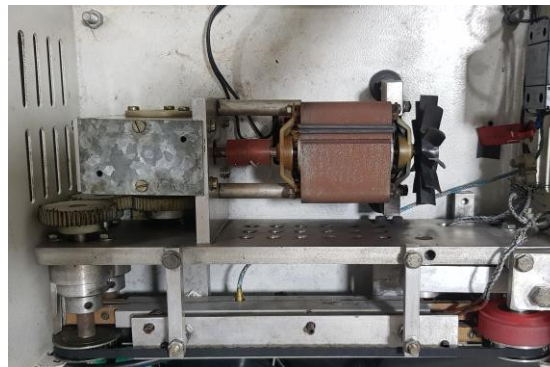Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 12/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Interior de equipamento do tipo selador pacote.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível.		
	Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).		
	(a)  (b) 		
	Fonte: Elaboração própria (2022)		
	A substituição da solda só deve ser realizada quando houver risco de danos para outros componentes, nos casos em que houver risco de danos a		
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e		
Termostato	Verifique a integridade do termostato quanto a presença de oxidação e ao		
Motor	- Verifique a integridade física do motor, não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade física da correia do motor quanto a deformidades, ressecamento, folga		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 13/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		e/ou desgaste excessivo, realize a substituição da correia e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i> . Quando aplicável, verifique a integridade física dos rolamentos do motor quanto a deformidades, acúmulo de resíduos, pontos de oxidação e desgaste. Para casos em que for verificado desgaste excessivo, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. Quando aplicável realize os ajustes nos itens com folga.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Aquecimento		- Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura no centro da área de selagem. Figura 6 - Local para posicionamento do sensor de temperatura do termômetro padrão. Termômetro digital  Área de selagem  Sensor de temperatura do termômetro Fonte: Elaboração própria (2022) - No equipamento, configure-o com a mínima temperatura de funcionamento. - No equipamento, acione a selagem. Após estabilização da temperatura, verifique o valor apresentado pelo termômetro padrão. Registre o valor medido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Em caso de falha no aquecimento e/ou tempo	

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 14/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

EVOXX EQUIPAMENTOS. **Manual de instruções. Seladora EVOXX**. r.00. Brasil: Evoxx, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Package sealing unit**. Reino Unido: GMDN, 15/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122334?lang=en>>. Acesso em: 12/1/2022.

GNATUS PRODUTOS MÉDITOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do proprietário. Seladora Clean Pack**. r.00. Brasil: Gnatus, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 15/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo selador pacote

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.116 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo selador pacote.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade da				
Alavanca de				
Resistência				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Termostato				
Motor				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.116 – Página 16/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Aquecimento				Temperatura configurada no equipamento	Temperatura medida (padrão)

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: