

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17 8
REFERÊNCIAS	17 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos	18


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos.

Os equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos são utilizados para separação e embalagem de medicamentos. O sistema robótico, automatizado, permite que o setor de farmácia do hospital separe de forma automática uma quantidade de medicamentos em embalagens unitárias, seladas e identificadas. (GMDN AGENCY,2017).


Figura 1 – Unitarizadora de medicamentos.

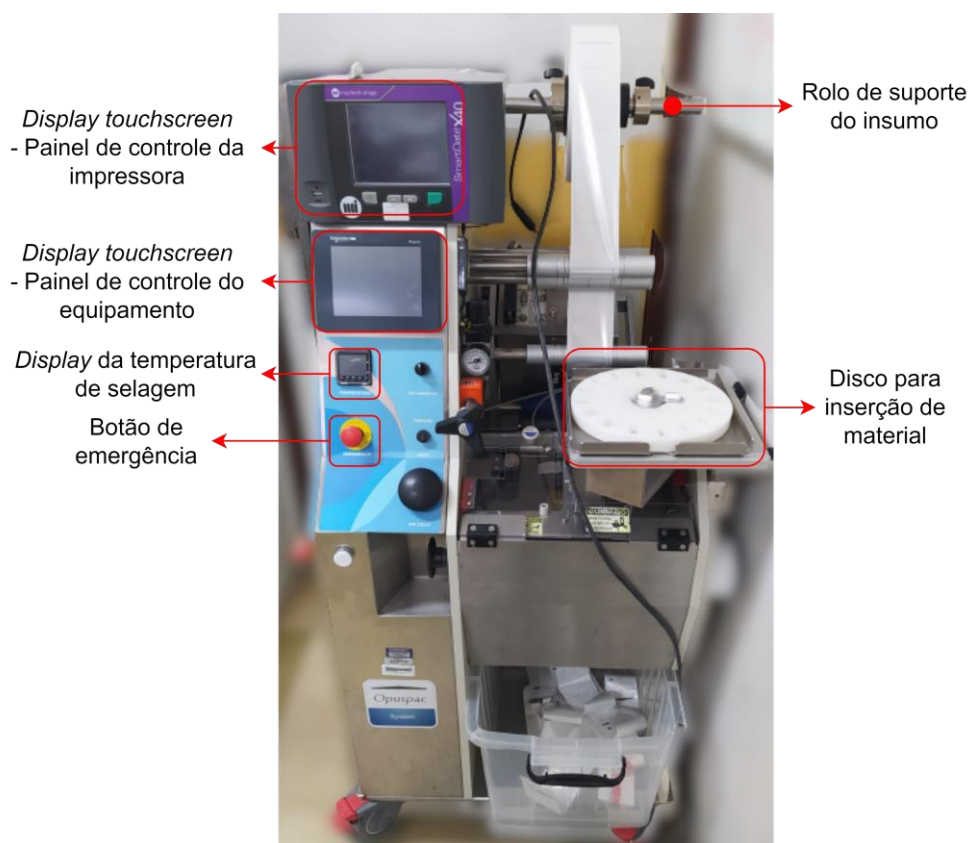

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo unitarizadora de medicamentos.

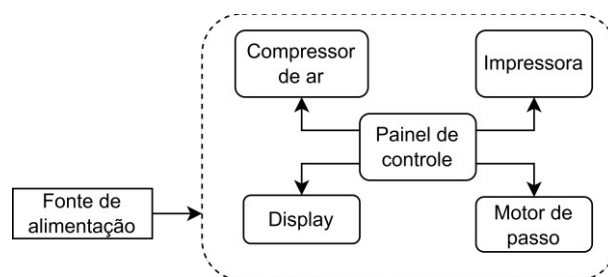

Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para
SISNAC (2017)	Manual técnico e soluções de problemas. BT506A2.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante a lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x50mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5"). Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	Emissão:	Próxima revisão:

Versão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Correias	Sempre que apresentar desgaste excessivo ou a cada 2 anos.
Mangueiras do sistema de ar	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Resistência de selagem	Sempre que apresentar desgaste excessivo,
Borracha da seladora	ou sempre que a selagem não estiver adequada.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 7/19	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO UNITARIZADORA DE			
Documento	MEDICAMENTOS	Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.


Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos.

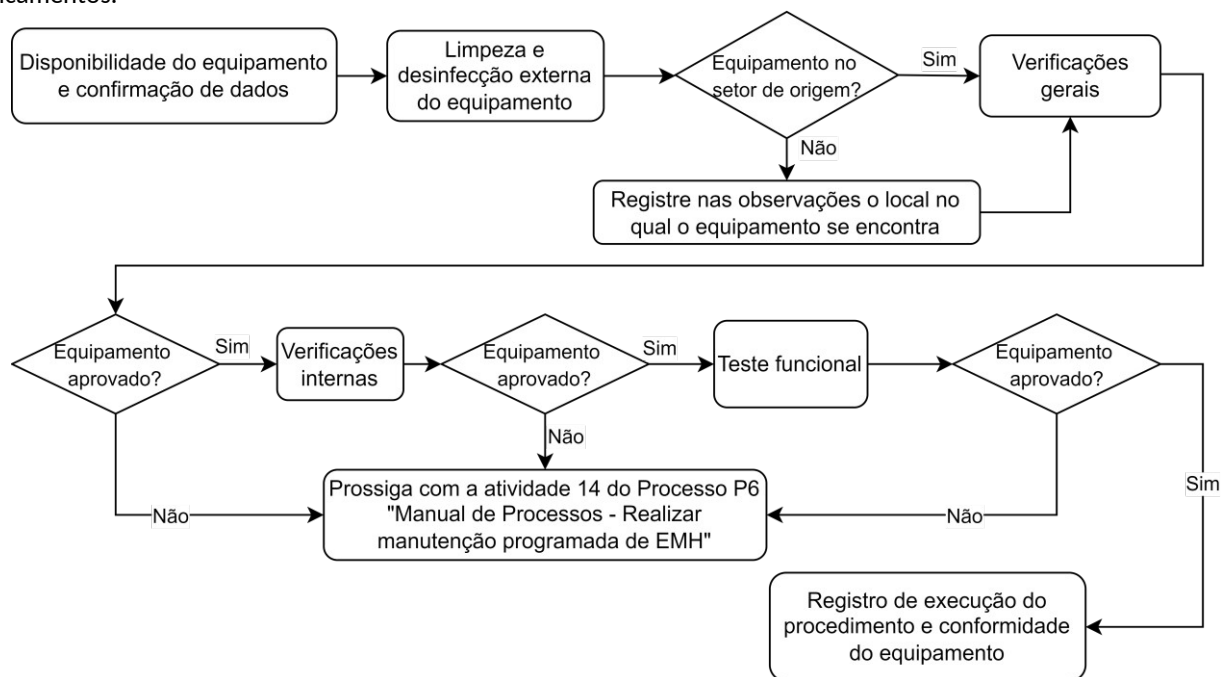

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento, nem indicação do fabricante.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo unitarizadora de medicamento, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de <u>conformidade</u> , anotar o setor no qual o equipamento
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou <u>identificador que constam no equipamento são os</u>
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações gerais

Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Realize a limpeza do equipamento de acordo com as instruções do item
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, deterioração e deformidades. Quando necessário realize ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Verifique a integridade dos discos de inserção de medicamento/ ampola quanto a rachaduras e deformidades. - Verifique a integridade dos rolos do sistema de alimentação do insumo quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Realize a limpeza quando necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer
Integridade do painel de controle do equipamento	- Verifique a integridade do painel de controle quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1
Display(s)	- Verifique a integridade física do(s) display(s) do equipamento. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável pelo setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no display. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou display com pontos queimados a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Saídas de ar em unitarizadora de medicamentos.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		Verifique a integridade das mangueiras do sistema quanto a rachaduras e ressecamento. Quando necessário, realize a substituição da mangueira e registre no campo de observações do checklist.	
Botão de emergência		- Verifique a integridade do botão de emergência quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidade e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Realize teste funcional no botão de emergência. Certifique-se de retorná-lo à posição original. Caso contrário, não será possível utilizar o equipamento. O teste pode ser realizado da seguinte maneira: pressione o botão de emergência e inicie um processo de embalagem manual no equipamento. O equipamento deverá apresentar mensagem de que o botão de emergência está ativo. Caso o equipamento dê início ao processo de embalagem, o teste foi bem-sucedido.	
Integridade do reservatório		- Verifique a integridade do reservatório no qual as embalagens são depositadas quanto a rachaduras, acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Para os casos em que o reservatório apresente danos estruturais, o equipamento não deve ser utilizado.	
Chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga da unitarizadora de medicamentos, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como danos estruturais, o equipamento não deve ser utilizado.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Fusíveis	Utilizando o multímetro verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou seja, sem continuidade, realize a substituição.		
Integridade física cabo de força	Verifique se há deformidades e/ou parte exposta do cabo de força. Para cabos de força destacáveis utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força.		
Integridade dos rodízios	- Quando aplicável, verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceda à substituição.		
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Proceda nos casos em que houver risco de	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza Interna	- Para remoção do excesso de poeira na base do equipamento, utilize um aspirador de pó elétrico. - Para os componentes eletrônicos, realize a limpeza utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões.		
Compressor de ar	- Verifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a tensão e corrente do compressor, registre os valores medidos em campo e compare com os valores adequados no <i>checklist</i>. Verifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor. - Verifique a integridade do manômetro de pressão do compressor quanto a rachaduras e deformidades. Os valores do manômetro devem estar legíveis. - Verifique a integridade do filtro de ar do compressor. Caso o filtro apresente acúmulo de líquido, realize a limpeza.		
Motor	- Verifique a integridade física do motor e seu eixo, não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Verifique se o motor está fixo e se suas conexões elétricas estão íntegras, realize os ajustes necessários. - Ligue o equipamento e verifique se o motor apresenta funcionamento adequado.		
Correias e engrenagens	- Verifique a integridade das correias e engrenagens internas quanto ao desgaste e rachaduras. - Caso alguma correia esteja com folga, utilizando o manual do equipamento realize o ajuste necessário. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste em algum dos itens, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva”.		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento		Ligue o equipamento e aguarde até que ele esteja em funcionamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Configure o equipamento para operação manual, e inserir um medicamento, pressione o botão indicado que a selagem deve ser realizada. Neste momento o equipamento deve indicar que não há conteúdo na embalagem.

Figura 7 – Exemplo de botão de acionamento manual em unitarizadora de medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Solicite 2 unidades de medicamentos, insira-o adequado no disco de alimentação, e dê

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 8 - Local para posicionamento de medicamento para realização de teste.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Verifique se as embalagens formadas estão com impressão correta e hermeticamente fechadas. Abra embalagem, não deve ser necessário o uso de força excessiva.

Figura 9 - Exemplo de selagem de embalagens realizada por unitarizadora de medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Caso o equipamento não realize o procedimento de unitarização, o item estará não conforme, neste

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Medication cart management system**. Reino Unido: GMDN, 27/3/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120796?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. **Manual técnico e soluções de problemas. BT506A2**. v.1.02. Brasil: Sisnac, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.122 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo unitarizadora de medicamentos

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel de Display(s)				
Impressora				
Seladora				
Saídas de ar				
Botão de emergência				
Integridade do				
Chave liga-desliga				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Integridade dos				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.122 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Compressor de ar				
Motor				
Correias e				

05 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: