

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico	19


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

Os equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico são utilizados para acomodação e posicionamento de pacientes durante a realização de procedimentos odontológicos, que variam de simples avaliações a pequenos procedimentos cirúrgicos. Possuem regulagem de altura e inclinação, geralmente através de comandos em um pedal (GMDN AGENCY, 2010).


Figura 1 - Cadeira exame tratamento odontológico.

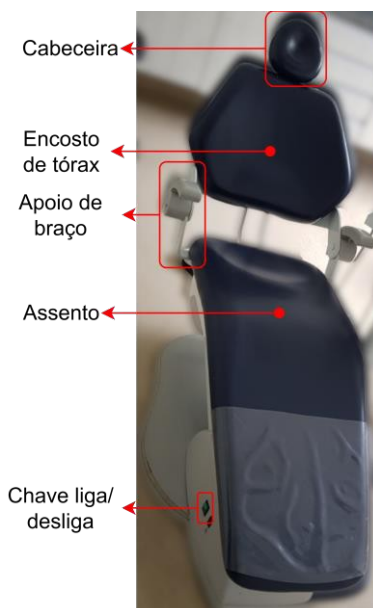

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

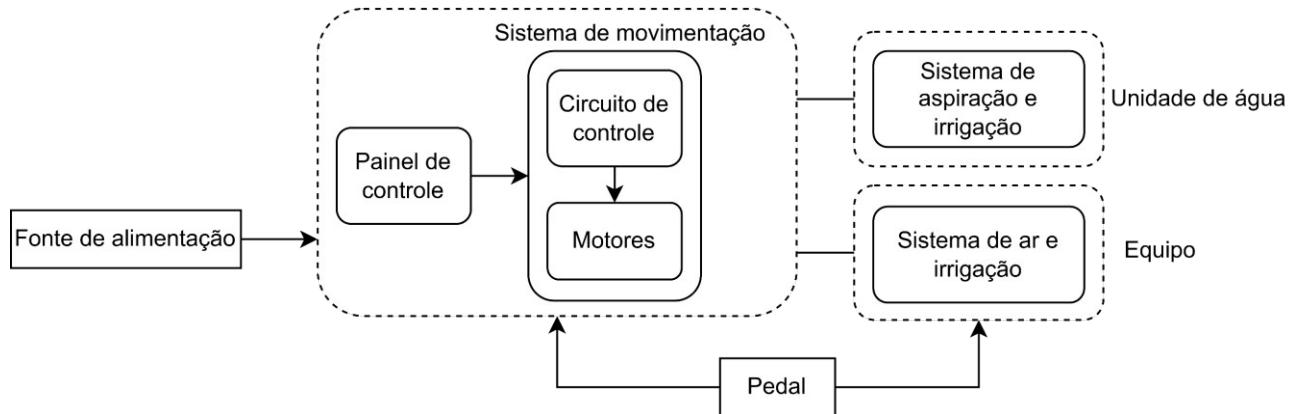

Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014a)	ABNT NBR ISO 6875 - Odontologia - Cadeira odontológica para paciente
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2014b)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
ALLIAGE (s.d.)		SAEVO. Manual do proprietário: Cadeira Syncrus.	
GNATUS (s.d.)		Manual do proprietário: Cadeira Syncrus GL.	
MIDMARK (2019)		Knight by Midmark. Biltmore Classic. Concept L/R Classic. Dental Chair. Service and Parts Manual.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16), 3 (3/8x5/16), 4 (1/2x5/16), 5 (3/4x5/16), 6 (1x5/16), 7 (1 1/4x5/16), 8 (1 1/2x5/16), 9 (1 3/4x5/16), 10 (2x5/16), 11 (2 1/4x5/16), 12 (2 1/2x5/16), 13 (2 3/4x5/16), 14 (3x5/16), 15 (3 1/4x5/16), 16 (3 1/2x5/16), 17 (3 3/4x5/16), 18 (4x5/16), 19 (4 1/4x5/16), 20 (4 1/2x5/16), 21 (4 3/4x5/16), 22 (5x5/16), 23 (5 1/4x5/16), 24 (5 1/2x5/16), 25 (5 3/4x5/16), 26 (6x5/16), 27 (6 1/4x5/16), 28 (6 1/2x5/16), 29 (6 3/4x5/16), 30 (7x5/16), 31 (7 1/4x5/16), 32 (7 1/2x5/16), 33 (7 3/4x5/16), 34 (8x5/16), 35 (8 1/4x5/16), 36 (8 1/2x5/16), 37 (8 3/4x5/16), 38 (9x5/16), 39 (9 1/4x5/16), 40 (9 1/2x5/16), 41 (9 3/4x5/16), 42 (10x5/16), 43 (10 1/4x5/16), 44 (10 1/2x5/16), 45 (10 3/4x5/16), 46 (11x5/16), 47 (11 1/4x5/16), 48 (11 1/2x5/16), 49 (11 3/4x5/16), 50 (12x5/16), 51 (12 1/4x5/16), 52 (12 1/2x5/16), 53 (12 3/4x5/16), 54 (13x5/16), 55 (13 1/4x5/16), 56 (13 1/2x5/16), 57 (13 3/4x5/16), 58 (14x5/16), 59 (14 1/4x5/16), 60 (14 1/2x5/16), 61 (14 3/4x5/16), 62 (15x5/16), 63 (15 1/4x5/16), 64 (15 1/2x5/16), 65 (15 3/4x5/16), 66 (16x5/16), 67 (16 1/4x5/16), 68 (16 1/2x5/16), 69 (16 3/4x5/16), 70 (17x5/16), 71 (17 1/4x5/16), 72 (17 1/2x5/16), 73 (17 3/4x5/16), 74 (18x5/16), 75 (18 1/4x5/16), 76 (18 1/2x5/16), 77 (18 3/4x5/16), 78 (19x5/16), 79 (19 1/4x5/16), 80 (19 1/2x5/16), 81 (19 3/4x5/16), 82 (20x5/16), 83 (20 1/4x5/16), 84 (20 1/2x5/16), 85 (20 3/4x5/16), 86 (21x5/16), 87 (21 1/4x5/16), 88 (21 1/2x5/16), 89 (21 3/4x5/16), 90 (22x5/16), 91 (22 1/4x5/16), 92 (22 1/2x5/16), 93 (22 3/4x5/16), 94 (23x5/16), 95 (23 1/4x5/16), 96 (23 1/2x5/16), 97 (23 3/4x5/16), 98 (24x5/16), 99 (24 1/4x5/16), 100 (24 1/2x5/16), 101 (24 3/4x5/16), 102 (25x5/16), 103 (25 1/4x5/16), 104 (25 1/2x5/16), 105 (25 3/4x5/16), 106 (26x5/16), 107 (26 1/4x5/16), 108 (26 1/2x5/16), 109 (26 3/4x5/16), 110 (27x5/16), 111 (27 1/4x5/16), 112 (27 1/2x5/16), 113 (27 3/4x5/16), 114 (28x5/16), 115 (28 1/4x5/16), 116 (28 1/2x5/16), 117 (28 3/4x5/16), 118 (29x5/16), 119 (29 1/4x5/16), 120 (29 1/2x5/16), 121 (29 3/4x5/16), 122 (30x5/16), 123 (30 1/4x5/16), 124 (30 1/2x5/16), 125 (30 3/4x5/16), 126 (31x5/16), 127 (31 1/4x5/16), 128 (31 1/2x5/16), 129 (31 3/4x5/16), 130 (32x5/16), 131 (32 1/4x5/16), 132 (32 1/2x5/16), 133 (32 3/4x5/16), 134 (33x5/16), 135 (33 1/4x5/16), 136 (33 1/2x5/16), 137 (33 3/4x5/16), 138 (34x5/16), 139 (34 1/4x5/16), 140 (34 1/2x5/16), 141 (34 3/4x5/16), 142 (35x5/16), 143 (35 1/4x5/16), 144 (35 1/2x5/16), 145 (35 3/4x5/16), 146 (36x5/16), 147 (36 1/4x5/16), 148 (36 1/2x5/16), 149 (36 3/4x5/16), 150 (37x5/16), 151 (37 1/4x5/16), 152 (37 1/2x5/16), 153 (37 3/4x5/16), 154 (38x5/16), 155 (38 1/4x5/16), 156 (38 1/2x5/16), 157 (38 3/4x5/16), 158 (39x5/16), 159 (39 1/4x5/16), 160 (39 1/2x5/16), 161 (39 3/4x5/16), 162 (40x5/16), 163 (40 1/4x5/16), 164 (40 1/2x5/16), 165 (40 3/4x5/16), 166 (41x5/16), 167 (41 1/4x5/16), 168 (41 1/2x5/16), 169 (41 3/4x5/16), 170 (42x5/16), 171 (42 1/4x5/16), 172 (42 1/2x5/16), 173 (42 3/4x5/16), 174 (43x5/16), 175 (43 1/4x5/16), 176 (43 1/2x5/16), 177 (43 3/4x5/16), 178 (44x5/16), 179 (44 1/4x5/16), 180 (44 1/2x5/16), 181 (44 3/4x5/16), 182 (45x5/16), 183 (45 1/4x5/16), 184 (45 1/2x5/16), 185 (45 3/4x5/16), 186 (46x5/16), 187 (46 1/4x5/16), 188 (46 1/2x5/16), 189 (46 3/4x5/16), 190 (47x5/16), 191 (47 1/4x5/16), 192 (47 1/2x5/16), 193 (47 3/4x5/16), 194 (48x5/16), 195 (48 1/4x5/16), 196 (48 1/2x5/16), 197 (48 3/4x5/16), 198 (49x5/16), 199 (49 1/4x5/16), 200 (49 1/2x5/16), 201 (49 3/4x5/16), 202 (50x5/16), 203 (50 1/4x5/16), 204 (50 1/2x5/16), 205 (50 3/4x5/16), 206 (51x5/16), 207 (51 1/4x5/16), 208 (51 1/2x5/16), 209 (51 3/4x5/16), 210 (52x5/16), 211 (52 1/4x5/16), 212 (52 1/2x5/16), 213 (52 3/4x5/16), 214 (53x5/16), 215 (53 1/4x5/16), 216 (53 1/2x5/16), 217 (53 3/4x5/16), 218 (54x5/16), 219 (54 1/4x5/16), 220 (54 1/2x5/16), 221 (54 3/4x5/16), 222 (55x5/16), 223 (55 1/4x5/16), 224 (55 1/2x5/16), 225 (55 3/4x5/16), 226 (56x5/16), 227 (56 1/4x5/16), 228 (56 1/2x5/16), 229 (56 3/4x5/16), 230 (57x5/16), 231 (57 1/4x5/16), 232 (57 1/2x5/16), 233 (57 3/4x5/16), 234 (58x5/16), 235 (58 1/4x5/16), 236 (58 1/2x5/16), 237 (58 3/4x5/16), 238 (59x5/16), 239 (59 1/4x5/16), 240 (59 1/2x5/16), 241 (59 3/4x5/16), 242 (60x5/16), 243 (60 1/4x5/16), 244 (60 1/2x5/16), 245 (60 3/4x5/16), 246 (61x5/16), 247 (61 1/4x5/16), 248 (61 1/2x5/16), 249 (61 3/4x5/16), 250 (62x5/16), 251 (62 1/4x5/16), 252 (62 1/2x5/16), 253 (62 3/4x5/16), 254 (63x5/16), 255 (63 1/4x5/16), 256 (63 1/2x5/16), 257 (63 3/4x5/16), 258 (64x5/16), 259 (64 1/4x5/16), 260 (64 1/2x5/16), 261 (64 3/4x5/16), 262 (65x5/16), 263 (65 1/4x5/16), 264 (65 1/2x5/16), 265 (65 3/4x5/16), 266 (66x5/16), 267 (66 1/4x5/16), 268 (66 1/2x5/16), 269 (66 3/4x5/16), 270 (67x5/16), 271 (67 1/4x5/16), 272 (67 1/2x5/16), 273 (67 3/4x5/16), 274 (68x5/16), 275 (68 1/4x5/16), 276 (68 1/2x5/16), 277 (68 3/4x5/16), 278 (69x5/16), 279 (69 1/4x5/16), 280 (69 1/2x5/16), 281 (69 3/4x5/16), 282 (70x5/16), 283 (70 1/4x5/16), 284 (70 1/2x5/16), 285 (70 3/4x5/16), 286 (71x5/16), 287 (71 1/4x5/16), 288 (71 1/2x5/16), 289 (71 3/4x5/16), 290 (72x5/16), 291 (72 1/4x5/16), 292 (72 1/2x5/16), 293 (72 3/4x5/16), 294 (73x5/16), 295 (73 1/4x5/16), 296 (73 1/2x5/16), 297 (73 3/4x5/16), 298 (74x5/16), 299 (74 1/4x5/16), 300 (74 1/2x5/16), 301 (74 3/4x5/16), 302 (75x5/16), 303 (75 1/4x5/16), 304 (75 1/2x5/16), 305 (75 3/4x5/16), 306 (76x5/16), 307 (76 1/4x5/16), 308 (76 1/2x5/16), 309 (76 3/4x5/16), 310 (77x5/16), 311 (77 1/4x5/16), 312 (77 1/2x5/16), 313 (77 3/4x5/16), 314 (78x5/16), 315 (78 1/4x5/16), 316 (78 1/2x5/16), 317 (78 3/4x5/16), 318 (79x5/16), 319 (79 1/4x5/16), 320 (79 1/2x5/16), 321 (79 3/4x5/16), 322 (80x5/16), 323 (80 1/4x5/16), 324 (80 1/2x5/16), 325 (80 3/4x5/16), 326 (81x5/16), 327 (81 1/4x5/16), 328 (81 1/2x5/16), 329 (81 3/4x5/16), 330 (82x5/16), 331 (82 1/4x5/16), 332 (82 1/2x5/16), 333 (82 3/4x5/16), 334 (83x5/16), 335 (83 1/4x5/16), 336 (83 1/2x5/16), 337 (83 3/4x5/16), 338 (84x5/16), 339 (84 1/4x5/16), 340 (84 1/2x5/16), 341 (84 3/4x5/16), 342 (85x5/16), 343 (85 1/4x5/16), 344 (85 1/2x5/16), 345 (85 3/4x5/16), 346 (86x5/16), 347 (86 1/4x5/16), 348 (86 1/2x5/16), 349 (86 3/4x5/16), 350 (87x5/16), 351 (87 1/4x5/16), 352 (87 1/2x5/16), 353 (87 3/4x5/16), 354 (88x5/16), 355 (88 1/4x5/16), 356 (88 1/2x5/16), 357 (88 3/4x5/16), 358 (89x5/16), 359 (89 1/4x5/16), 360 (89 1/2x5/16), 361 (89 3/4x5/16), 362 (90x5/16), 363 (90 1/4x5/16), 364 (90 1/2x5/16), 365 (90 3/4x5/16), 366 (91x5/16), 367 (91 1/4x5/16), 368 (91 1/2x5/16), 369 (91 3/4x5/16), 370 (92x5/16), 371 (92 1/4x5/16), 372 (92 1/2x5/16), 373 (92 3/4x5/16), 374 (93x5/16), 375 (93 1/4x5/16), 376 (93 1/2x5/16), 377 (93 3/4x5/16), 378 (94x5/16), 379 (94 1/4x5/16), 380 (94 1/2x5/16), 381 (94 3/4x5/16), 382 (95x5/16), 383 (95 1/4x5/16), 384 (95 1/2x5/16), 385 (95 3/4x5/16), 386 (96x5/16), 387 (96 1/4x5/16), 388 (96 1/2x5/16), 389 (96 3/4x5/16), 390 (97x5/16), 391 (97 1/4x5/16), 392 (97 1/2x5/16), 393 (97 3/4x5/16), 394 (98x5/16), 395 (98 1/4x5/16), 396 (98 1/2x5/16), 397 (98 3/4x5/16), 398 (99x5/16), 399 (99 1/4x5/16), 400 (99 1/2x5/16), 401 (99 3/4x5/16), 402 (100x5/16), 403 (100 1/4x5/16), 404 (100 1/2x5/16), 405 (100 3/4x5/16), 406 (101x5/16), 407 (101 1/4x5/16), 408 (101 1/2x5/16), 409 (101 3/4x5/16), 410 (102x5/16), 411 (102 1/4x5/16), 412 (102 1/2x5/16), 413 (102 3/4x5/16), 414 (103x5/16), 415 (103 1/4x5/16), 416 (103 1/2x5/16), 417 (103 3/4x5/16), 418 (104x5/16), 419 (104 1/4x5/16), 420 (104 1/2x5/16), 421 (104 3/4x5/16), 422 (105x5/16), 423 (105 1/4x5/16), 424 (105 1/2x5/16), 425 (105 3/4x5/16), 426 (106x5/16), 427 (106 1/4x5/16), 428 (106 1/2x5/16), 429 (106 3/4x5/16), 430 (107x5/16), 431 (107 1/4x5/16), 432 (107 1/2x5/16), 433 (107 3/4x5/16), 434 (108x5/16), 435 (108 1/4x5/16), 436 (108 1/2x5/16), 437 (108 3/4x5/16), 438 (109x5/16), 439 (109 1/4x5/16), 440 (109 1/2x5/16), 441 (109 3/4x5/16), 442 (110x5/16), 443 (110 1/4x5/16), 444 (110 1/2x5/16), 445 (110 3/4x5/16), 446 (111x5/16), 447 (111 1/4x5/16), 448 (111 1/2x5/16), 449 (111 3/4x5/16), 450 (112x5/16), 451 (112 1/4x5/16), 452 (112 1/2x5/16), 453 (112 3/4x5/16), 454 (113x5/16), 455 (113 1/4x5/16), 456 (113 1/2x5/16), 457 (113 3/4x5/16), 458 (114x5/16), 459 (114 1/4x5/16), 460 (114 1/2x5/16), 461 (114 3/4x5/16), 462 (115x5/16), 463 (115 1/4x5/16), 464 (115 1/2x5/16), 465 (115 3/4x5/16), 466 (116x5/16), 467 (116 1/4x5/16), 468 (116 1/2x5/16), 469 (116 3/4x5/16), 470 (117x5/16), 471 (117 1/4x5/16), 472 (117 1/2x5/16), 473 (117 3/4x5/16), 474 (118x5/16), 475 (118 1/4x5/16), 476 (118 1/2x5/16), 477 (118 3/4x5/16), 478 (119x5/16), 479 (119 1/4x5/16), 480 (119 1/2x5/16), 481 (119 3/4x5/16), 482 (120x5/16), 483 (120 1/4x5/16), 484 (120 1/2x5/16), 485 (120 3/4x5/16), 486 (121x5/16), 487 (121 1/4x5/16), 488 (121 1/2x5/16), 489 (121 3/4x5/16), 490 (122x5/16), 491 (122 1/4x5/16), 492 (122 1/2x5/16), 493 (122 3/4x5/16), 494 (123x5/16), 495 (123 1/4x5/16), 496 (123 1/2x5/16), 497 (123 3/4x5/16), 498 (124x5/16), 499 (124 1/4x5/16), 500 (124 1/2x5/16), 501 (124 3/4x5/16), 502 (125x5/16), 503 (125 1/4x5/16), 504 (125 1/2x5/16), 505 (125 3/4x5/16), 506 (126x5/16), 507 (126 1/4x5/16), 508 (126 1/2x5/16), 509 (126 3/4x5/16), 510 (127x5/16), 511 (127 1/4x5/16), 512 (127 1/2x5/16), 513 (127 3/4x5/16), 514 (128x5/16), 515 (128 1/4x5/16), 516 (128 1/2x5/16), 517 (128 3/4x5/16), 518 (129x5/16), 519 (129 1/4x5/16), 520 (129 1/2x5/16), 521 (129 3/4x5/16), 522 (130x5/16), 523 (130 1/4x5/16), 524 (130 1/2x5/16), 525 (130 3/4x5/16), 526 (131x5/16), 527 (131 1/4x5/16), 528 (131 1/2x5/16), 529 (131 3/4x5/16), 530 (132x5/16), 531 (132 1/4x5/16), 532 (132 1/2x5/16), 533 (132 3/4x5/16), 534 (133x5/16), 535 (133 1/4x5/16), 536 (133 1/2x5/16), 537 (133 3/4x5/16), 538 (134x5/16), 539 (134 1/4x5/16), 540 (134 1/2x5/16), 541 (134 3/4x5/16), 542 (135x5/16), 543 (135 1/4x5/16), 544 (135 1/2x5/16), 545 (135 3/4x5/16), 546 (136x5/16), 547 (136 1/4x5/16), 548 (136 1/2x5/16), 549 (136 3/4x5/16), 550 (137x5/16), 551 (137 1/4x5/16), 552 (137 1/2x5/16), 553 (137 3/4x5/16), 554 (138x5/16), 555 (138 1/4x5/16), 556 (138 1/2x5/16), 557 (138 3/4x5/16), 558 (139x5/16), 559 (139 1/4x5/16), 560 (139 1/2x5/16), 561 (139 3/4x5/16), 562 (140x5/16), 563 (140 1/4x5/16), 564 (140 1/2x5/16), 565 (140 3/4x5/16), 566 (141x5/16), 567 (141 1/4x5/16), 568 (141 1/2x5/16), 569 (141 3/4x5/16), 570 (142x5/16), 571 (142 1/4x5/16), 572 (142 1/2x5/16), 573 (142 3/4x5/16), 574 (143x5/16), 575 (143 1/4x5/16), 576 (143 1/2x5/16), 577 (143 3/4x5/16), 578 (144x5/16), 579 (144 1/4x5/16), 580 (144 1/2x5/16), 581 (144 3/4x5/16), 582 (145x5/16), 583 (145 1/4x5/16), 584 (145 1/2x5/16), 585 (145 3/4x5/16), 586 (146x5/16), 587 (146 1/4x5/16), 588 (146 1/2x5/16), 589 (146 3/4x5/16), 590 (147x5/16), 591 (147 1/4x5/16), 592 (147 1/2x5/16), 593 (147 3/4x5/16), 594 (148x5/16), 595 (148 1/4x5/16), 596 (148 1/2x5/16), 597 (148 3/4x5/16), 598 (149x5/16), 599 (149 1/4x5/16), 600 (149 1/2x5/16), 601 (149 3/4x5/16), 602 (150x5/16), 603 (150 1/4x5/16), 604 (150 1/2x5/16), 605 (150 3/4x5/16), 606 (151x5/16), 607 (151 1/4x5/16), 608 (151 1/2x5/16), 609 (151 3/4x5/16), 610 (152x5/16), 611 (152 1/4x5/16), 612 (152 1/2x5/16), 613 (152 3/4x5/16), 614 (153x5/16), 615 (153 1/4x5/16), 616 (153 1/2x5/16), 617 (153 3/4x5/16), 618 (154x5/16), 619 (154 1/4x5/16), 620 (154 1/2x5/16), 621 (154 3/4x5/16), 622 (155x5/16), 623 (155 1/4x5/16), 624 (155 1/2x5/16), 625 (155 3/4x5/16), 626 (156x5/16), 627 (156 1/4x5/16), 628 (156 1/2x5/16), 629 (156 3/4x5/16), 630 (157x5/16), 631 (157 1/4x5/16), 632 (157 1/2x5/16), 633 (157 3/4x5/16), 634 (158x5/16), 635 (158 1/4x5/16), 636 (158 1/2x5/16), 637 (158 3/4x5/16), 638 (159x5/16), 639 (159 1/4x5/16), 640 (159 1/2x5/16), 641 (159 3/4x5/16), 642 (160x5/16), 643 (160 1/4x5/16), 644 (160 1/2x5/16), 645 (160 3/4x5/16), 646 (161x5/16), 647 (161 1/4x5/16), 648 (161 1/2x5/16), 649 (161 3/4x5/16), 650 (162x5/16), 651 (162 1/4x5/16), 652 (162 1/2x5/16), 653 (162 3/4x5/16), 654 (163x5/16), 655 (163 1/4x5/16), 656 (163 1/2x5/16), 657 (163 3/4x5/16), 658 (164x5/16), 659 (164 1/4x5/16), 660 (164 1/2x5/16), 661 (164 3/4x5/16), 662 (165x5/16), 663 (165 1/4x5/16), 664 (165 1/2x5/16), 665 (165 3/4x5/16), 666 (166x5/16), 667 (166 1/4x5/16), 668 (166 1/2x5/16), 669 (166 3/4x5/16), 670 (167x5/16), 671 (167 1/4x5/16), 672 (167 1/2x5/16), 673 (167 3/4x5/16), 674 (168x5/16), 675 (168 1/4x5/16), 676 (168 1/2x5/16), 677 (168 3/4x5/16), 678 (169x5/16), 679 (169 1/4x5/16), 680 (169 1/2x5/16), 681 (169 3/4x5/16), 682 (170x5/16), 683 (170 1/4x5/16), 684 (170 1/2x5/16), 685 (170 3/4x5/16), 686 (171x5/16), 687 (171 1/4x5/16), 688 (171 1/2x5/16), 689 (171 3/4x5/16), 690 (172x5/16), 691 (172 1/4x5/16), 692 (172 1/2x5/16), 693 (172 3/4x5/16), 694 (173x5/16), 695 (173 1/4x5/16), 696 (173 1/2x5/16), 697 (173 3/4x5/16), 698 (174x5/16), 699 (174 1/4x5/16), 700 (174 1/2x5/16), 701 (174 3/4x5/16), 702 (175x5/16), 703 (175 1/4x5/16), 704 (175 1/2x5/16), 705 (175 3/4x5/16), 706 (176x5/16), 707 (176 1/4x5/16), 708 (176 1/2x5/16), 709 (176 3/4x5/16), 710 (177x5/16), 711 (177 1/4x5/16), 712 (177 1/2x5/16), 713 (177 3/4x5/16), 714 (178x5/16), 715 (178 1/4x5/16), 716 (178 1/2x5/16), 717 (178 3/4x5/16), 718 (179x5/16), 719 (179 1/4x5/16), 720 (179 1/2x5/16), 721 (179 3/4x5/16), 722 (180x5/16), 723 (180 1/4x5/16), 724 (180 1/2x5/16), 725 (180 3/4x5/16), 726 (181x5/16), 727 (181 1/4x5/16), 728 (181 1/2x5/16), 729 (181 3/4x5/16), 730 (182x5/16), 731 (182 1/4x5/16), 732 (182 1/2x5/16), 733 (182

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó) descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Detergente neutro.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).


6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico. As

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

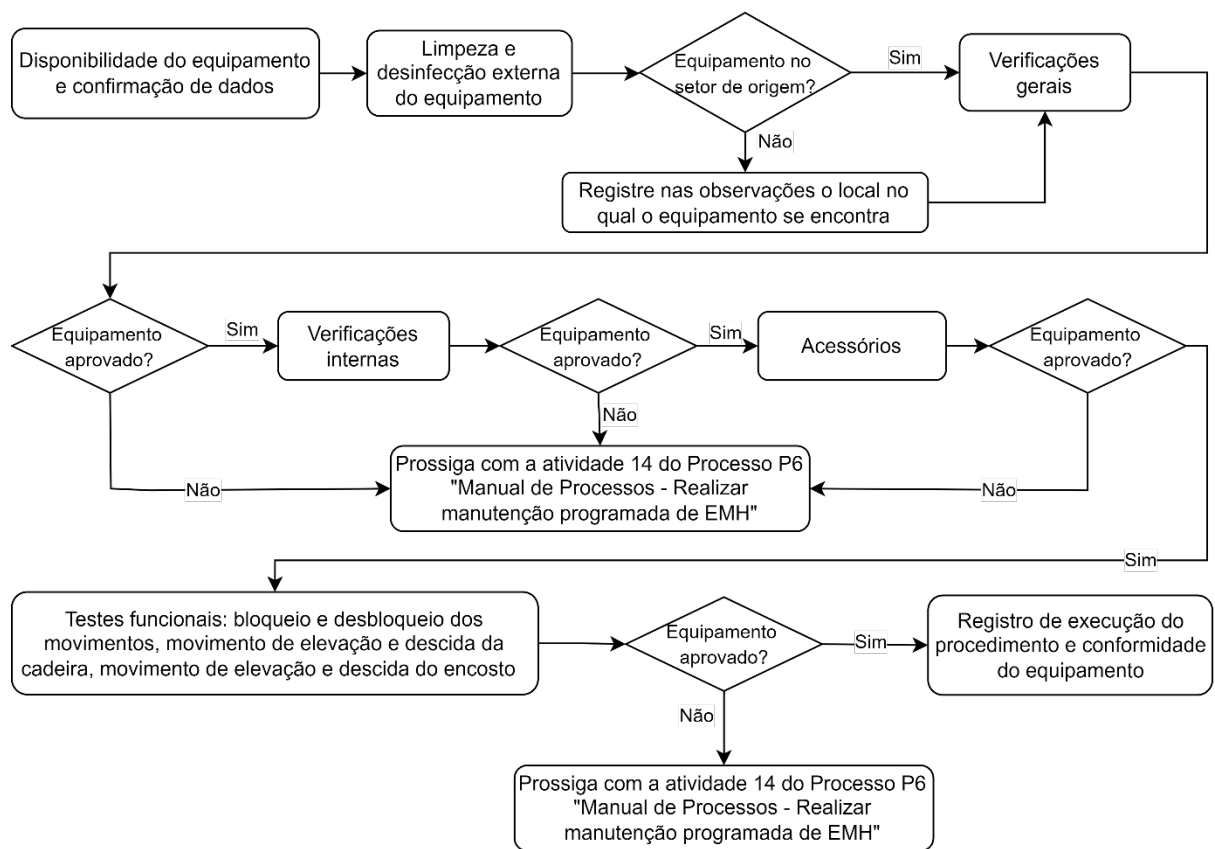

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico é de 12 (doze) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas para desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, cabo de força e acessórios.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos cadastrados.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor da etiqueta.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	•Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação. •Realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas (bandejas, suportes). •Quando aplicável, utilizando graxa líquida em spray, faça a lubrificação das articulações de movimentação. •Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.
Integridade física do estofamento	•Verifique a integridade física do estofamento, quanto a: manchas e rasgos. •Em caso de avarias superficiais como ranhuras e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade do painel de controle		•Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. •Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. •Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento incorreto, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade e condutividade do cabo de força		•Verifique a integridade das extremidades do cabo de força se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. •Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme com um multímetro, realize um teste de continuidade. •Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conformes. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Porta fusíveis e fusíveis		•Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis em caso de	
Integridade dos apoios de braço		•Verifique a integridade dos apoios de braço quanto a: rachaduras, deformidades, pintura e pontos de oxidação. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. •Verifique se os apoios estão firmes, em caso de frouxidão realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes os apoios apresentarem risco de acidente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade da cabeceira		•Verifique a integridade da cabeceira quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. •Verifique o encaixe e fixação da cabeceira. O encaixe deve se dar de maneira fluida, quando posicionada e travada a cabeceira deve manter-se fixa à cadeira. •Realize o ajuste necessários em parafusos com folga, e peças soltas. •Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes pontiagudas ou sem fixação, o item estará não conformes.	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

LED indicador de conexão à rede elétrica	•Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. •Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade. •Após as verificações e ajustes, realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Manual de Manutenção Preventiva.
--	--

Integridade física da chave liga-desliga	•Verifique a integridade da chave liga-desliga da cadeira. Não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. •Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. •Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com acionamento acidental, proceder com atividade 14 do Manual de Manutenção Preventiva.
--	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. O acesso ao interior de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico geralmente se dá em duas partes, sendo uma delas através da base, na qual os parafusos estão dispostos ao seu lado e a outra através do acento do paciente, cujos parafusos geralmente estão localizados em sua base inferior. Antes de iniciar a abertura, posicione a cadeira em uma posição confortável para acesso a base e parafusos na base inferior do acento. Desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. A base pode ter encaixe específico, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.	
---	--

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas

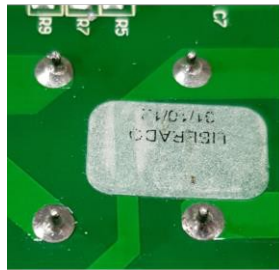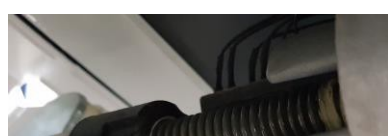Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e anote no campo de observações.	
Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático, remova sujeira dos componentes.	
Limitadores de movimento (Switch)		•Verifique a integridade dos limitadores de movimento quanto a pontos de oxidação e conexões elétricas e o estado de conservação dos limitadores no campo de observação de cada equipamento.	
Motores		•De acordo com o manual do equipamento, verifique a integridade do motor de elevação (geralmente localizado na base do equipamento) e motor de movimentação do encosto (geralmente localizado sob o acento do paciente). Não deve haver pontos de oxidação. Quando necessário, realize a limpeza dos contatos do motor utilizando pincel antiestático e limpe contatos. •Utilizando graxa líquida realize a lubrificação do eixo dos motores. Figura 5 - Eixo de motor de cadeira tratamento exame odontológico. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		•Verifique a integridade física das caixas dos moto deve haver deformidades ou partes eletrônicas ex Avarias devem ser registradas no campo de obser	
Sistema hidráulico		•Quando aplicável, de acordo com as instruções d do equipamento realize a verificação do nível de ó sistema hidráulico do equipamento. Se necessário	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pedal		•Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. •Realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. Figura 6 – Exemplo de pedal de cadeira exame tratamento odontológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) •Verifique a integridade do cabo do pedal. Não deve ha rachaduras ou partes expostas. •Verifique se as marcações estão legíveis. Exemplo: indicação de movimento de altura, movimento do enco •Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. •Em caso de avarias que possam comprometer a s do paciente, usuário ou do equipamento, como ra	
Equipo		•Quando aplicável, verifique a integridade do equipo quanto a rachaduras, manchas e ranhuras. •Verifique a integridade dos suportes de caneta do equi quanto a rachaduras e deformidades. Os suportes deve estar fixos ao equipo. •Em caso de avarias superficiais, como ranhuras e registre no campo de observações do <i>checklist</i> de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Unidade de água	Figura 7 - Exemplo de equipo de cadeira exame tratamento odontológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) •Realize a movimentação do equipo (movimento de aproximação e afastamento em relação a cadeira), não deve haver ruídos, quando posicionada o equipo deve permanecer fixo no local onde foi colocado. Quando necessário, realize lubrificação e ajustes para movimentação correta. •De acordo com o manual do equipamento, abra o equipamento e verifique a integridade do circuito interno: - o Verifique a integridade das mangueiras de ar e de água, quanto a rachaduras e ressecamento. - o Verifique os pontos de conexões das mangueiras, devem estar fixos. •Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como escape de água, manuseio com rachaduras e superaquecimento, registre no campo de observação do checklist.		
	Figura 8 – Exemplo de unidade de água. 		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		•Verifique a integridade dos suportes do sugador e da seringa tríplice quanto a rachaduras e deformidades. Os suportes devem estar fixos a unidade de água. •Na unidade de água, realize o comando para acionamento da água e verifique se a água para limpeza é verificada interior da cuba. Não deve haver acúmulo de água na superfície da cuba. Quando necessário, verifique se há acúmulo de resíduos no ralo da cuba e remova-os. •Conecte um analisador de pressão digital a extremidade do cabo do sugador, na unidade de água realize o comando para acionamento da aspiração e verifique se o analisador de pressão apresenta um valor negativo de pressão em visor. Quando aplicável, verifique se os valores obtidos estão de acordo com o indicado pelo manual do equipamento. Caso não haja alteração de parâmetros no display do analisador de pressão verifique o encaixe do cabo do sugador e refaça o teste. Figura 9 - Conexões para realização do teste de aspiração.  Fonte: Elaboração própria () •Para os casos em que a cuba da unidade de água apresentar rachaduras, ou que o sugador não apre
--	--	--

Testes funcionais

Item de verificação	Instruções
Bloqueio e desbloqueio dos movimentos	- No painel de controle do equipamento, ou em trava externa específica, ative o bloqueio da movimentação da cadeira e acione um por um dos comandos de movimento, a cadeira não deverá permanecer imóvel. - No painel de controle do equipamento, ou em trava externa específica, desbloqueie a movimentação da cadeira e teste todos os botões dos painéis de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.
Movimento de elevação da cadeira	- No painel de controle e/ou pedal da cadeira exame odontológico, dê o comando para realizar o movimento específico. - Mantenha o comando acionado até que a cadeira realize o movimento até seu limite. Após o teste, a de iniciar o próximo movimento retorne a cadeira a posição inicial. - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Se a cadeira não realizar o movimento, ou se r
Movimento de descida da cadeira	
Movimento de elevação do encosto	
Movimento de descida do encosto	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. **Saevo. Manual do proprietário: Cadeira Syncrus.** r.00. Brasil: Alliage, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1–8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 6875**: Odontologia – Cadeira odontológica para paciente. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Dental chair, electric**. Reino Unido: GMDN, 17/3/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137341?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GNATUS- EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do proprietário: Cadeira Syncrus GL**. r. 07. Brasil: Gnatus, s.d.

MIDMARK CORPORATION. **Knight by Midmark. Biltmore Classic. Concept L/R Classic. Dental Chair. Service and Parts Manual**. r.AA2. EUA: Midmark, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.046 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento odontológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade física do				
Integridade do painel				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos apoios				
Integridade da				
LED indicador de				
Integridade física da				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Limitadores de				
Motores				
Sistema hidráulico				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.046 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CADEIRA EXAME	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

Versão:

04 ACESSÓRIOS				
Item a ser verificado C	N.C	N.A	Observações	
Pedal				

Equipo

Unidade de água

05 TESTES FUNCIONAIS				
Item a ser verificado C	N.C	N.A	Observações	
Bloqueio e desbloqueio dos movimentos				
Movimento de elevação da cadeira				
Movimento de descida da cadeira				

Movimento de elevação do encosto

Movimento de descida do encosto

OBSERVAÇÕES

Executor

	Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia
Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:

Aprovação (Nome, Função, Assinatura)

Data: